

## DULET



REF. F360275350

## DULET

### DISPOSITIVO ULTRALIGERO DE EVACUACIÓN TÁCTICA

Sábana desechable ultraligera para traslado y cobertura, impermeable y absorbente. Mantiene seco al herido para reducir su pérdida de calor y protege las camillas y mesas quirúrgicas para evitar contaminación cruzada. Puede ser utilizada para trasladar, transferir o mover a heridos de cualquier peso.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ 100% Libre de Látex.
- ✓ Capa superior blanca en contacto con el paciente: Polipropileno 100% hidrófilo de 20 g/m<sup>2</sup>.
- ✓ Capa intermedia de S.A.P. poliacrilato sódico densidad promedio de 65 g/m<sup>2</sup> ± 5 g. entre dos láminas de tissue de celulosa de 5 g.
- ✓ Capa inferior verde de poliéster de 42 g/m<sup>2</sup>.
- ✓ Peso aproximado del producto listo para su uso 120 g.
- ✓ Asas de tracción de poliéster de cinta 144 decitex de 50mm cosida a la sábana con nylon negro de 150 dtex. Sobre ésta una segunda de 25 mm cosida 5 cm dejando tramos de 19 cm libres.
- ✓ Capacidad de absorción ≥2000 ml/m<sup>2</sup>.
- ✓ Resistencia teórica de tracción 220 kg que permite mover al paciente tirando de la sábana y usarla de transfer.
- ✓ Tolerancias: Medidas ± 1 cm/m. Peso ± 10% / pieza






# DULET

REF. F360275350

## DULET

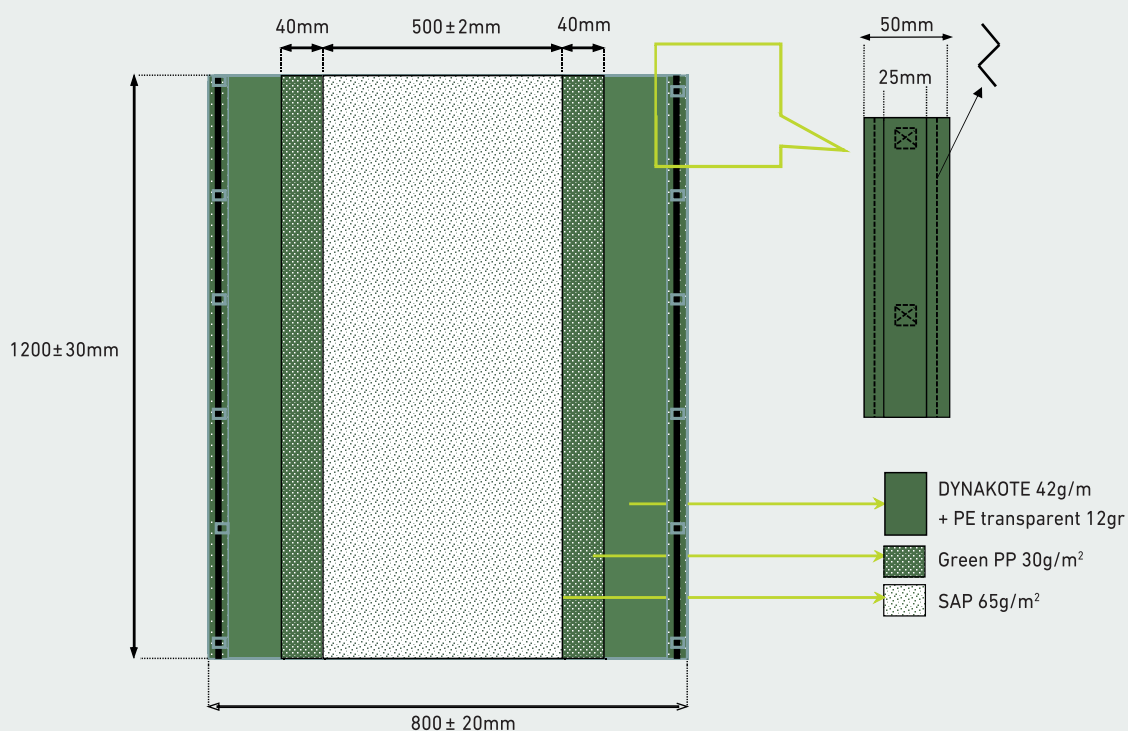

## PRESENTACIÓN

Sábana de 120 x 80 cm con banda central absorbente de 50 x 120 cm.  
Empaquetado individual al vacío para portar en la mochila de combate.

## CONSERVACIÓN

Una vez fuera de su paquete mantener el producto en lugar seco.

## CONFORMIDAD

Producto de Clase I no estéril. Es conforme a EN 13795. Auto certificación CE según directiva Europea 93/42/ECC.

## TIPOS DE USOS

- Extracción rápida de heridas de zonas de combate
- Extracción de heridas en Barrancos cuevas etc.
- Cualquier situación que requiera el transporte rápido de personas con impedimentos para desplazarse por si solas.



LIBRE DE  
LÁTEX



UN SOLO  
USO



IMPERMEABLE



NO ESTÉRIL



MARCADO CE